


AI SOS

Pas monitorujący

Instrukcja obsługi

Bądź tam, kiedy Cię potrzebują

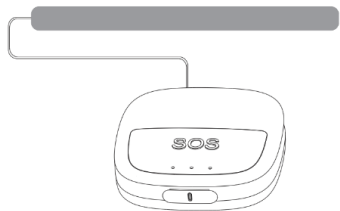

aby pomoc nadeszła na czas

UWAGA!
Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego jako odpadów komunalnych, o czym świadczy również symbol umieszczony na produkcie i / lub jego opakowaniu. Te formy odpadów podlegają oddzielnym zbiorom zorganizowanym przez władze miejskie lub mogą zostać zwrócone sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu. Niewłaściwa utylizacja i / lub niewłaściwe użycie takiego sprzętu lub jego części może stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego z powodu obecności substancji niebezpiecznych. Nielegalne usuwanie tych odpadów jest zabronione zgodnie z D.Lgs 25/07/2005 n.151.




OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1 x Pas monitorujący
- 1 x Przycisk SOS AI SOS Button
- 1 x Uchwyt ścienny
- 1 x Zasilacz 5V / 2A USB
- 1 x Instrukcja obsługi

Ten produkt to połączenie inteligentnego pasa śledzącego i przycisku AI SOS, który został zaprojektowany specjalnie po to, aby zapewnić seniorom dwa sposoby wzywania pomocy w nagłych wypadkach, a jednocześnie monitorować jakość snu.

Pas śledzący monitoruje w czasie rzeczywistym tętno, częstość oddechów, zaburzenia snu i jego długość itp., a alarm uruchamia się automatycznie, emitując sygnał alarmowy w przypadku wykrycia przez system nietypowej sytuacji/nagłego wypadku. Przycisk AI SOS umożliwia wzwwanie pomocy w nagłych wypadkach za pomocą jednego dotknięcia i wzwwanie pomocy głosowej. Posiada również funkcję uczenia się, aby uwzględnić różnice w wymowie słów alarmowych. Produkt działa poprzez połączenie Wi-Fi i wymaga użycia towarzyszącej aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą skonfigurować kontakty alarmowe w aplikacji mobilnej, które będą otrzymywać automatyczne powiadomienia telefoniczne i SMS-y po odebraniu sygnału alarmowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

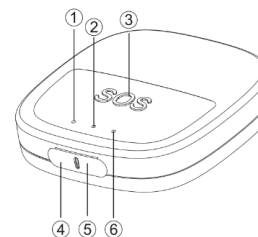

- ① wskaźnik LED sieci Wifi
- ② wskaźnik LED zasilania
- ③ przycisk SOS
- ④ przycisk reset – kasowania ustawień
- ⑤ przycisk learn – uczenie słów alarmowych
- ⑥ wskaźnik LED aktywności funkcji głosowych

Objaśnienie kontrolki LED

Wskaźnik LED sieci Wifi (niebieski)

- oczekiwanie: brak światła
- normalne działanie: ciągłe świecenie
- problem z siecią: migotanie

Wskaźnik LED zasilania(czerwony)

- brak zasilania: wyłączone
- normalne działanie: ciągłe świecenie

Wskaźnik LED aktywności funkcji głosowych (zielony)

- funkcje nieaktywne: wyłączone
- normalne działanie: ciągłe świecenie

Objaśnienia przycisków

Przycisk SOS

Naciśnij, aby uzyskać pomoc w nagłych wypadkach. System automatycznie powiadomi ustawione kontakty alarmowe za pomocą wiadomości SMS i połączeń głosowych.

Przycisk Reset

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. (Tryb ponownego parowania sieci)

Przycisk „Learn”


Naciśnij trzy razy z rzędu, aby uruchomić tryb uczenia systemu słów alarmowych. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wyczyścić pamięć systemu.

SPECYFIKACJA

Wymiary przycisku SOS	80mmx80mmx20mm
Wymiary inteligentnego pasa monitorującego	860mmx65mmx1,5mm
Wejście adaptera	100-240V~50/60Hz
Wyjście adaptera	5V / 2A
Komunikacja	Wi-Fi
Temperatura pracy	0-40°C / 32-104°F
Wilgotność robocza	20%-90% RH
Konfiguracja sieci	Wi-Fi + BLE (BLE jest zwykle używany do konfiguracji sieci w trybie mieszanym częstotliwości 2,4 GHz i 5GHz)
Zasięg odbioru	4 metry (w środowisku o hałasie otoczenia ≤50 dB, przy źródle dźwięku w zakresie 60° względem centralnej osi produktu)
Kompatybilne platformy	Android 6.0 or above, iOS 11.0 or above, Harmony 2.0 or above.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO UŻYCIA


1. Podłącz urządzenie: Włóż złącze typu C paska śledzącego do portu typu C przycisku AI SOS. Następnie podłącz złącze przycisku AI SOS do adaptera USB.

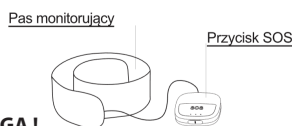


UWAGA !

Nie podłączaj kabla typu C do telefonu, zasilacza ani innych urządzeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

2. Włącz urządzenie, a następnie zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację mobilną. Następnie zaloguj się do aplikacji i rozpocznij konfigurację sieci. Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci użyj aplikacji, aby skonfigurować listę kontaktów alarmowych. (Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcjach „Konfiguracja sieciowa produktu” i „Konfiguracja kontaktów alarmowych” w instrukcji obsługi).

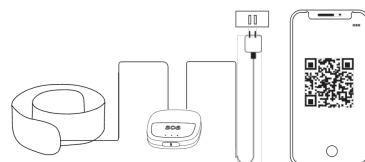

3. Umieść pas śledzący w poprzek łóżka, pod prześcieradłem, w pobliżu miejsca, w którym znajduje się serce, gdy leżysz.

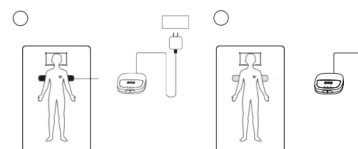

4. W razie potrzeby możesz użyć uchwytu urządzenia, aby przymocować przycisk AI SOS do ściany lub innej pozycji pionowej.

UWAGA !

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nie należy składać pasa śledzącego.



Pas śledzący nie jest wodoodporny ani wodoszczelny.



APLIKACJA MOBILNA

1. Apple App Store:

Wyszukaj „KeepHealth na iPhone”, aby pobrać aplikację. Oprogramowanie jest wydawane przez Typhoon Network Technology.



KeepHealth dla iPhone

2. Google Play Store:

Wyszukaj „KeepHealth na Android”, aby pobrać aplikację. Oprogramowanie jest wydawane przez Typhoon Network Technology.



KeepHealth dla Android

Możesz również zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu produktu lub kod QR podany poniżej, aby pobrać aplikację mobilną




KONFIGURACJA SIECI

1. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
2. Połącz telefon z siecią Wi-Fi 2,4GHz, z którą chcesz parować produkt.

UWAGA !

Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi działa w trybie 2,4 GHz lub w trybie mieszanym. Nie łącz się z sieciami Wi-Fi działającymi wyłącznie w trybie 5 GHz.

3. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie parowania. Jeśli produkt jest w trybie parowania, kontrolka „Sieć” (niebieska) będzie wyłączona, a kontrolka „Zasilanie” (czerwona) będzie świecić światłem ciągłym. W przeciwnym razie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na produkcie przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Po pomyślnym zresetowaniu produkt przejdzie w tryb parowania.

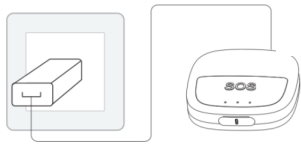


4. Otwórz aplikację KeepHealth zainstalowaną na telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zarejestrować i zalogować.



5. Kliknij przycisk kodu QR „ ” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji. Zeskanuj ponownie kod QR z tyłu produktu, aby rozpocząć konfigurację sieci. Podczas konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie hasła Wi-Fi. Po wpisaniu hasła Wi-Fi kliknij „Aktywuj urządzenie”. Jeśli pojawi się komunikat „Konfiguracja sieci pomyślna”, proces parowania zostanie zakończony. Jeśli nie, sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest ustawiona na 2,4 GHz, czy na tryb mieszany 2,4 i 5 GHz. Pamiętaj, że hotspoty Wi-Fi działające wyłącznie w paśmie 2,4 GHz zapewniają najwyższą kompatybilność. Jeśli tryb mieszany 2,4 i 5 GHz nadal nie działa, możesz spróbować użyć trybu 2,4 GHz jako alternatywy.

ZAWSZE ZAPISUJ SWOJE LOGINY I HASŁA !

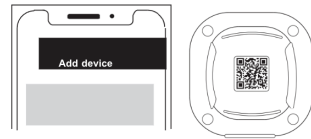

KONTAKTY ALARMOWE

Otwórz aplikację mobilną i kliknij stronę „Ja”. Wybierz „Kontakty alarmowe” i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu. Wprowadź niezbędne dane kontaktowe w nagłych wypadkach.

UWAGA !



smartfon



Do 5 kontaktów alarmowych

Dla każdego urządzenia można skonfigurować maksymalnie 5 kontaktów alarmowych.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez 10 sekund.
2. Niebieska kontrolka na urządzeniu zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych. (Zazwyczaj następnym krokiem jest ponowna konfiguracja ustawień sieciowych)

FUNKCJA POWIĄZANIA URZĄDZEŃ


Produkt obsługuje skojarzenia wielu kont, a konto administratora służy do konfiguracji sieci. Po skonfigurowaniu sieci wiele kont można powiązać z tym samym urządzeniem, co umożliwia korzystanie z tego samego produktu.

Proces skojarzenia urządzenia wygląda następująco:

1. Otwórz aplikację mobilną i przejdź do strony „Ja”. Wybierz menu „Ustawienia urządzenia”.
2. Kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu interfejsu i wybierz opcję „Skojarz urządzenie”. Aparat otworzy się automatycznie. Zeskanuj kod QR z tyłu urządzenia i kliknij przycisk „Skojarz urządzenie”. Poczekaj na zatwierdzenie przez administratora urządzenia.
3. Po otrzymaniu wiadomości z prośbą o skojarzenie administrator urządzenia może kliknąć wiadomość lub przejść do „Centrum wiadomości” w prawym górnym rogu strony „Ja”, aby udzielić autoryzacji skojarzenia.

AKTYWACJA FUNKCJI SOS

1. Naciśnij raz przycisk SOS na urządzeniu.
2. Wezwij pomoc głosowo.

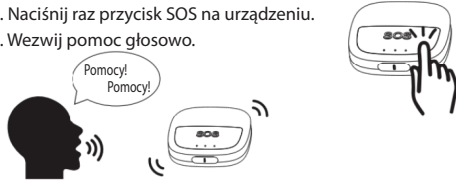

Aby skorzystać z funkcji głosowej należy 'nauczyć' urządzenia hasła wzywania pomocy. Naciśnij przycisk „Learn” trzy razy z rzędu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wypowiedzieć spersonalizowaną frazę alarmową SOS. Po pomyślnym nauczaniu się powtórz wcześniej nagrałą frazę alarmową SOS.

UWAGA !


1. Podczas nagrywania niestandardowej frazy alarmowej SOS należy zapewnić ciche otoczenie.
2. Zaleca się używanie głosu użytkownika urządzenia podczas nagrywania niestandardowej frazy alarmowej SOS.
3. Jeśli chcesz zmodyfikować nagrałą niestandardową frazę alarmową SOS, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Learn Button” przez 10 sekund, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie nagrać.
4. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu niestandardowej frazy alarmowej SOS, zaleca się wypowiedzenie frazy dwa razy pod rząd lub użycie frazy składającej się z dwóch lub więcej słów podczas nagrywania.
5. Aby uniknąć nękania telefonicznego, różne firmy telekomunikacyjne w różnych regionach wprowadziły różne ograniczenia dotyczące powiadomień SMS i połączeń. Zasadniczo wymagany jest minimalny odstęp czasu co najmniej 1 minutę między każdą wiadomością SMS lub połączeniem.

INSTALACJA

1. Produkt można umieścić na biurku lub blacie.
2. Alternatywnie, produkt można zamontować na ścianie, postępując zgodnie z poniższymi krokami.


Krok 1

Przymocuj płytę montażową poziomo do ściany za pomocą dołączonej taśmy klejącej lub wkrętów.

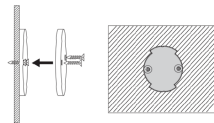


Krok 2

Wsuń przycisk AI SOS w płytę montażową.

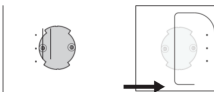

Krok 3

Obróć przycisk SOS na prawo o 90° aby zabezpieczyć przycisk na miejscu.

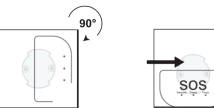

UWAGI

1. Nota bezpieczeństwa

Po użyciu tego produktu uznaje się, że rozumiesz, iż nie jest on urządzeniem medycznym. Nie należy go używać jako substytutu profesjonalnej porady lekarskiej ani do kompleksowego nadzoru. Wszelkie dane z monitoringu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek schorzeń. W celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia zaburzeń snu oraz innych problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem. Wyrażasz zgodę na to, że nie ponosisz odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z Twoich działań, takie jak nadmierne poleganie na produkcie, odstępstwa od informacji spowodowane wadliwą obsługą i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń wobec producenta lub importera albo sprzedawcy,

2. Ostrzeżenia dotyczące produktu

Rozumiesz, że produkt może sporadycznie ulegać awariom, dlatego powinieneś regularnie go konserwować i testować, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Ponadto stabilne i szybkie połączenie internetowe jest kluczowe dla prawidłowego działania produktu. Wyrażasz zgodę na to, że nie ponosisz odpowiedzialności za problemy spowodowane niestabilnością sieci.

3. Dokładność danych

Wyraźnie zgadzasz się, że mogą istnieć potencjalne rozbieżności pomiędzy oświadczeniem a produktem, nawet jeśli każdy wskaźnik produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

4. Czynniki niekontrolowane

W nieoczekiwanych przypadkach wyraźnie zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług, awarie i dokładność powiadomień wynikające z nieoczekiwanych czynników, takich jak kłęski żywiołowe, działania rządowe, awarie komunikacyjne, problemy ze sprzętem, wady konstrukcyjne itp. Ponadto wyraźnie zgadzasz się, że nie gwarantujemy, że dane terminala i powiadomienia o alertach zostaną dostarczone odpowiednim kontaktom na czas i nie ponosisz odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje z tego wynikające.

5. Usługi stron trzecich

Ze względu na konieczność interakcji z systemami stron trzecich wyraźnie zgadzasz się, że nie ponosisz odpowiedzialności za bezpieczeństwo, dokładność, skuteczność ani inne niepewne ryzyka związane z usługami i treściami dostarczonymi przez osoby trzecie, a także nie ponosisz odpowiedzialności za jakiegokolwiek spory i szkody z tego wynikające..

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe związane z korzystaniem z produktu, w tym utratę działalności lub zysków, szkodę dla reputacji firmy, utratę danych, koszty zakupu produktów lub usług zastępczych i inne straty niematerialne.

7. Zmiany w produkcie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności między instrukcją obsługi a produktem fizycznym, prosimy o uwzględnienie samego produktu.

8. Odpowiedzialność użytkownika

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Wszelkie naruszenia instrukcji lub jakiegokolwiek wypadki, straty majątkowe lub inne straty spowodowane nieoczekiwanym zdarzeniem podlegają odpowiedzialności użytkownika w przypadku sporów prawnych.

Uwaga: zakupione urządzenia umożliwiają wykonanie 100 połączeń telefonicznych i wiadomości SMS.

Jeżeli pakiet startowy się zakończy istnieje możliwość dokupienia dodatkowych połączeń.

